

**DR.C 医薬**  
ハイドロ銀チタン®マスク

ふつう サイズ  
3枚入

**+6 花粉ピーク対策**  
分解力 ストロング



Hyd[AgTiO<sub>2</sub>]

医師が考えたハイドロ銀チタン®マスク

---

**花粉<sup>※</sup>を  
水に変えるマスク**

※花粉の中のタンパク質を分解

**強かつ長時間対策に**  
花粉ピーク時のスポーツ・受験時等での使用に  
ニオイのタンパク質を分解するので数日間使用可能です。



長時間つけても、耳が痛くなりにくい  
やわらか無痛ひも(耳かけゴム)採用

細菌・ウイルス・黄砂・  
PM2.5 防御フィルター

**[ハイドロ銀チタン® 製品ラインナップ]** 用途にあわせて温度を変えております。

強	分解力	くもり止め付	ラインナップ	用途	交換目安
	+10	×	花粉 <sup>※</sup> ・ハウスダスト <sup>※</sup> 対策[超分解]	花粉・ハウスダストが多い場所での速やかな対策	1~7日間
	+6	○	花粉 <sup>※</sup> ピーク対策[ストロング]	花粉ピーク時のスポーツ・受験時等の使用	1~5日間
	+5	○	ハウスダスト <sup>※</sup> 対策	清掃時のハウスダスト・花粉対策	1~5日間
	+4	○	花粉 <sup>※</sup> 対策[レギュラー]	花粉の季節の日常使い・予防	1~3日間

●+4・+5・+6・+10は、ハイドロ銀チタン®の温度を示しています。●交換目安は環境・条件によって変化します。※花粉・ハウスダスト・カビ・汗・ニオイ・タンパク質の種類・量によっては分解できないものもあり、使用環境によって効果は異なります。

特許第5995100号

マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

**Hyd[AgTiO<sub>2</sub>]**  
**ハイドロ銀チタン®**


ハイドロ銀チタン®(Hyd[AgTiO<sub>2</sub>])  
 テクノロジーは、約1,000の病院の  
 空気清浄機フィルターに使用されて  
 いる技術です。

**防御フィルターでPM2.5もブロック**  
**ハイドロ銀チタン®マスク**

フィルター性能

PFE: 平均99% (0.1μm粒子捕集効率試験)  
 BFE: 平均99% (バクテリア懸濁液捕集効率試験)  
 VFE: 平均99% (ウイルス懸濁液捕集効率試験)  
 花粉粒子: 平均99% (花粉捕集効率試験)

※試験機関: 一般財団法人 カケンテストセンター

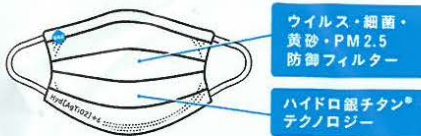

ウイルス・細菌・  
 黄砂・PM2.5  
 防御フィルター

ハイドロ銀チタン®  
 テクノロジー

花粉・ハウスダストのタンパク質を水に変える



ブランド維持のため、特殊印刷により  
 文字の位置・濃淡は商品によって異なります。

医師の新しい発想で生まれたハイドロ銀チタン®(Hyd[AgTiO<sub>2</sub>])テクノロジーは、花粉/ハウスダスト/カビ等  
 のタンパク質や、汗※/ニオイ※/不衛生タンパク質を分解して水に変える、DR.C医薬独自のクリーン技術です。

※汗・ニオイのタンパク質を分解

**使用方法** ● マークがある方が外側です。

1



上下裏表を確認して  
 ノーズフィッターを  
 鼻の形に合わせます。

2



顔の大きさに  
 合わせて  
 プリーツを上下に  
 広げます。

### ⚠ 注意事項

- 1日の最大連続使用時間は12時間以内を目安にしてください。
- 分解力による刺激で、頬・皮膚・口唇部のしびれや赤味・ヒリヒリ感を感じる場合があります。その際は使用を一時的に中止すると改善しますが、再利用により刺激が悪化する場合は、使用を中止してください。
- ハイドロ銀チタン®は、光が無くても作用する触媒ですが、その性質上、光が当たると機能が上がります。それに伴い、時間経過によりマスクに色調変化が出現することがありますが、機能には問題なくお使いいただけます。
- 目の中に入れてください。
- 乳幼児・喘息様症状のある方は使用をお控えください。
- 洗濯は分解力が低下しますのでお控えください。
- 本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
- 火気のそばでの使用はお控えください。



安心カルテ  
 登録ページへ

### 保管上の注意

■高温・多湿・直射日光・水気を避けて保管してください。■乳幼児の手の届かないところに保管してください。

### 品質表示

品名	マスク(花粉を水に変えるマスク) ふつうサイズ	対象	かぜ・花粉・ホコリ・ハウスダスト等
素材	本体・フィルター(ポリプロピレン・ポリエステル)・耳かけゴム(ポリウレタン)・ノーズフィッター(ポリエチレン)		
入数	3枚入	サイズ	約160mm x 95mm
		包装材	ポリプロピレン・アルミ

販売元 DR.C医薬株式会社 東京都新宿区西新宿6-2-3  
 問い合わせ先 TEL:03-3340-1979 (受付時間:月~金(祝日除く)9:00~17:00)  
<http://www.drcliyaku.jp>

MADE IN CHINA ハイドロ銀チタン®フィルター部分はDR.C医薬(株)にて、日本で生産しております。



4 573407 430245



外装: PP, アルミ Lot.No. SH-1127

160+601